

E·Z Trocar 5mm

微创穿刺器

商品名：腔镜套管

用途


- 腹腔镜下微创外科手术用穿刺器
适用5mm手术钳

特点

- 本产品专用于腹腔镜下单孔手术的穿刺器
- 提供普通和附带有二通注气口的两种型号
- 把手部位简洁紧凑，手持方便
外筒的凸状螺纹具有减速效果，能够有效防止过激穿破腹膜。
- 外筒有效长度有两种规格
普通型=70mm 加长型=95mm
- 设计合理，性价比高

请务必在使用前了解如下产品说明

外筒

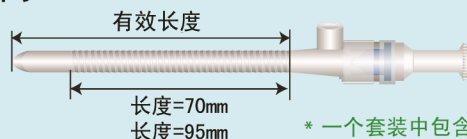

* 一个套装中包含有1根内针
2根 外筒和2个穿刺深度游标

内针 外径5.8mm




穿刺深度游标



附有二通的注气口

外筒

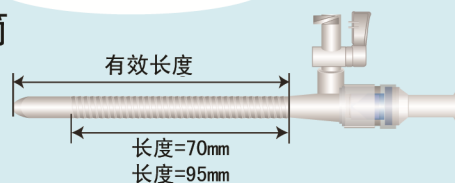

内针 外径5.8mm



穿刺深度游标



hakko® 八光商贸(上海)有限公司

电话: 021-52580225 52580567 传真: 021-52580235

地址: 中国上海市淮海西路442弄83号名都商务楼903室

邮件: hakko@uninet.com.cn

http://www.hakko-medical.cn/

邮编: 200052

具体规格咨询，请与我们联系！谢谢